

## نوار احیاء کودکان Broselow pediatric emergency tape


نوار احیا کودکان که بعنوان نوار براسلو (Broselow) معروف است یک نوار کاغذی است که با رنگ کد گذاری شده است و در تمام جهان در بخشهای اورژانس کودکان استفاده می شود.

محاسبه میزان داروهای کودکان که بر اساس وزن انجام می گیرد در زمان احیا و در موقعیتهای اورژانس وقت گیر است و بعلت عجله کادر درمان گاهی با خطا مواجه می شود.


نوار براسلو بر اساس قد کودک وزن کودک را تخمین زده و میزان داروهای اورژانس و سایزوسایل مورد استفاده در احیا کودک و همچنین ولتاژ (ژول) دستگاه D/C shock مناسب با وزن کودک را مشخص می کند و تحت یک رنگ خاص ارائه می دهد.



این نوار برای کودکان با حداکثر وزن 36 کیلو (12 سال) طراحی شده است و به 8 منطقه وزنی با رنگها متفاوت تقسیم شده است. در هر منطقه مقدار داروهای اورژانس و مایعات وریدی - سایزوسایل مورد استفاده در احیا و میزان ولتاژ دستگاه دفیبریلاتور مناسب با وزن تقریبی کودک ثبت شده است.

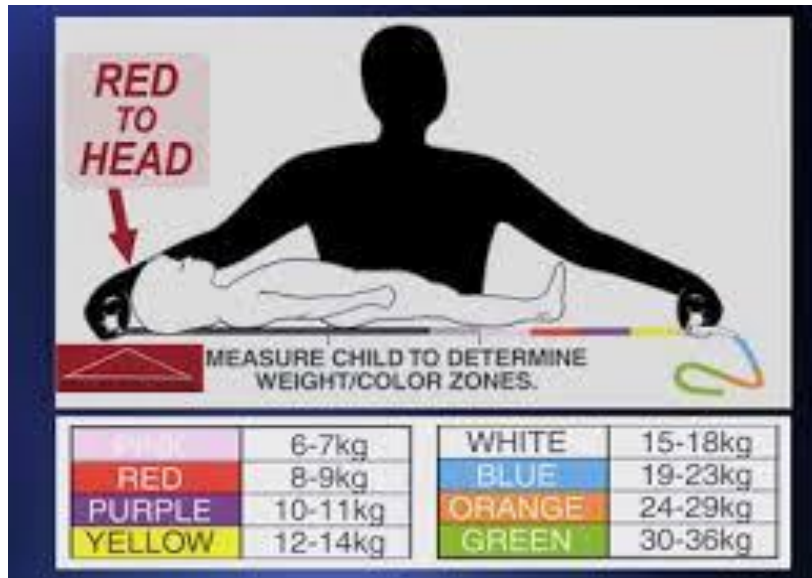

برای استفاده از این نوار کودک باید در حالت خوابیده باشد. با یک دست طوری نوار را نگهدارید که قسمت قرمز رنگ بالای نوار مماس با بالاترین نقطه سر کودک باشد. بخاطر بسپارید **قرمز روی سر** با دست دیگر نوار را در طول بدن کودک بکشید تا به پاشنه برسد (به پاشنه برسد نه به شصت پا) ناحیه ی رنگی که پاشنه کودک در آن قرار گرفته وزن تقریبی کودک را نشان می دهد.

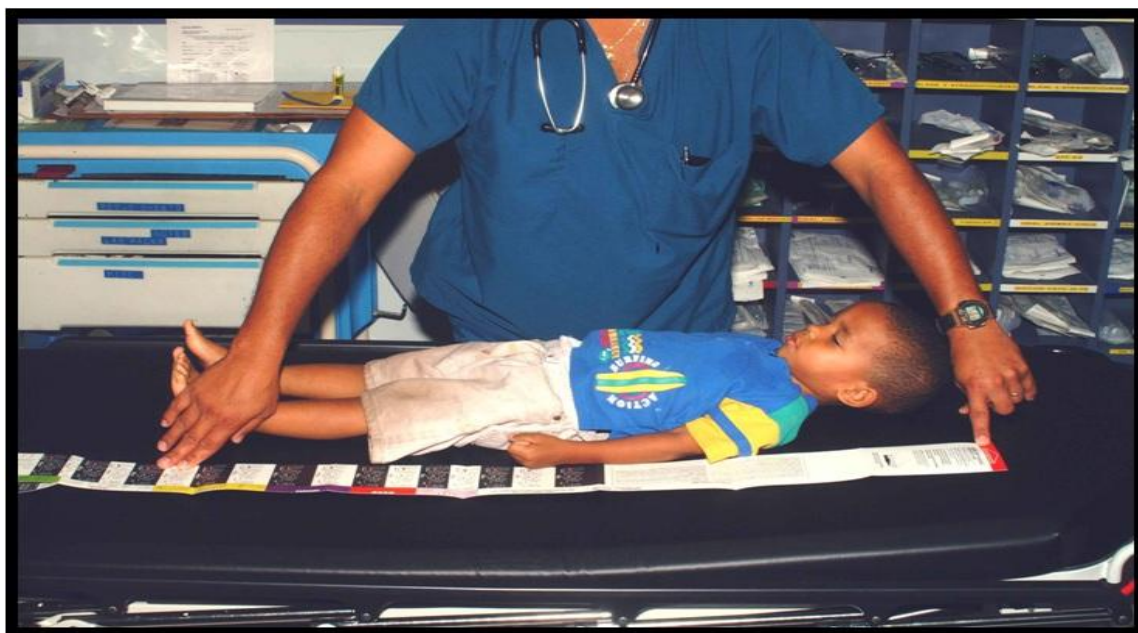

اگر ظاهر کودک چاق بود و اضافه وزن داشت یک ناحیه بالاتر را تنها برای مقدار داروها در نظر بگیرید اما برای انتخاب سایز تجهیزات از همان ناحیه که پاشنه کودک در آن قرار گرفته استفاده کنید.



این نوار با روکش سلیفون چاپ شده است و قابل ضد عفونی کردن می باشد.